

Compat[®] Buddy

Umfassendes Sortiment an flachen Gastrostomie-Ernährungs sonden

Die flache Gastrostomie-Ernährungs sonde Compat[®] Buddy (Button) ist für die Verwendung bei Patienten bestimmt, denen zeitweilig oder durchgehend enteral Nahrung, Flüssigkeit oder Medikamente über ein Magenstoma zugeführt werden müssen. Eignet sich auch zur Entlastung des Magens.

● Funktionen auf einen Blick


Der Compat[®] Buddy Button ist in verschiedenen Größen (12/14/16/18/20/24 FR) und Längen (0,8 bis 6,5 cm) verfügbar, um **verschiedenen Patientenbedürfnissen und klinischen Anforderungen** gerecht zu werden.

Patientenkomfort

- Die weiche, biokompatible Silikonsonde und der hochbeständige Silikonballon **fördern die maximale Nutzungsdauer und verringern die Notwendigkeit eines Sondenersatzes.**
- Das versenkte distale Ende **schont die Magenwand.**
- Eine diskrete und komfortable Lösung, **die dem Patienten ein höheres Maß an Bewegungsfreiheit bietet.**

Einfache Handhabung: Der Compat[®] Buddy Button ist als praktisches Kit zur einfachen Sondenlegung erhältlich. Zur besseren Rückverfolgbarkeit wird das Kit **einzel**n in einer sterilen Verpackung mit zwei **abnehmbaren** Etiketten geliefert.

Sichere Materialien: Frei von DEHP, BPA und Latex*.

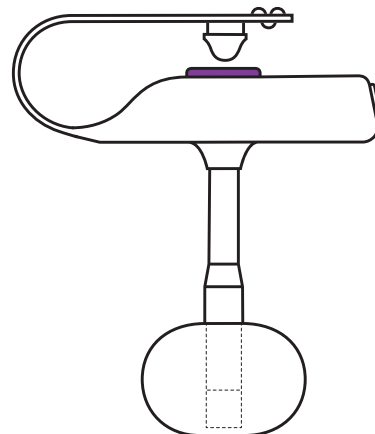


● Bestellinformationen

Länge des Stomakanals (cm)	Größe (French)					
	12 FR	14 FR	16 FR	18 FR	20 FR	24 FR
0,8	12466557	12466601	12466635	12466759	12466828	12466844
1,0	12466535	12466577	12466642	12466795	12466835	12466864
1,2	12466544	12466600	12466636	12466784	12466841	12466847
1,5	12460321	12460325	12466761	12466785	12466836	12466870
1,7	12466556	12460330	12460320	12466798	12466815	12466865
2,0	12466534	12460327	12460341	12466823	12466842	12466846
2,3	12466543	12466568	12466745	12466824	12466817	12466856
2,5	12466555	12460342	12460352	12466825	12466837	12466871
2,7	12466554	12466576	12466719	12466805	12466818	12466857
3,0	12466561	12466589	12460347	12466830	12466838	12466869
3,5	12466560	12460331	12466752	12466806	12466839	12466868
4,0	12466551	12466620	12466753	12466826	12466863	12466859
4,5	12466528	12466598	12466770	12466807	12466862	12466890
5,0	12466527	12466621	12466762	12466808	12466852	12466892
5,5		12466616		12466811		
6,0		12466632		12466809		
6,5		12466626				

Patientenversorgung. Unsere Priorität.

Umfassendes Sortiment an flachen Gastrostomie-Ernährungs sonden

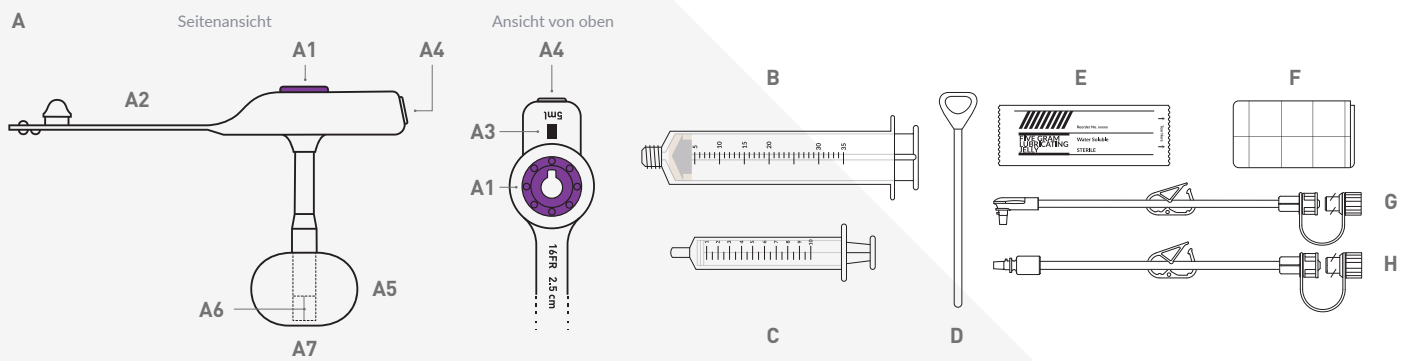

Komponenten

- A** Flache Gastrostomie-Ernährungs sonde Compat® Buddy
A1 Lilafarbener Ernährungskonnektor mit Anti-Rückflussventil. Kompatibel mit geraden und rechtwinkligen Erweiterungssets
A2 Kappe mit Größen- und Längenangabe (French)
A3 Positionsmarkierung für das Erweiterungsset
A4 Inflationsventil mit Luer-Anschluss und Ballonvolumenangabe in ml

Buttongröße und Ballonvolumen						
Größe (FR)	12	14	16	18	20	24
Volumen (ml)	3,0	4,0	5,0	5,0	8,0	8,0

- A5** Hochbeständiger Silikonballon
A6 Röntgendichte Streifen für die Platzierung und Positionsbestätigung
A7 Versenkte distale Spitze
B Mit ENFit® Erweiterungssets kompatible ENFit® 35-ml-Spritze
C Luer-Spritze zur Balloninflation
D Mandrin
E Wasserlösliches Gleitmittel
F Gazetupfer (2 Stück)
G ENFit® Erweiterungsset mit rechtwinkligem Konnektor, 30 cm, einfach
H ENFit® Erweiterungsset mit geradem Konnektor, 30 cm, einfach

Technische Daten

- Steril:** Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Verpackung: Einzel verpackt.
Lagerung: In der Originalverpackung, bei Raumtemperatur und in einer trockenen Umgebung lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmestrahlung schützen.
Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum. Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung: Für den Langzeitgebrauch indiziert. Für den Einmalgebrauch.
Größe und Länge: Von 12 bis 24 FR und von 0,8 bis 6,5 cm. Siehe Tabelle auf Seite 1.
CE-Kennzeichnung: Entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Eine CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten benannten Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE0123).
Klassifizierung: Klasse IIb.
Rechtmäßiger Hersteller: Degania Silicone Ltd.
Materialien: Sonde: Silikon. Alle Materialien sind frei von DEHP, BPA und Latex*. Weitere Einzelheiten auf Anfrage.

*DEHP und BPA werden während des Herstellungsprozesses nicht absichtlich zugesetzt. Enthält kein Naturkautschuklatex. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Compat® Vertriebsvertreter oder auf der Webseite unter www.compat.com
 *Sofern nicht anders angegeben, werden alle Marken mit Genehmigung verwendet.